



Medivical

شرکت ویرا تریتا مدرن

No. 18, Kar Afarinan St. 14/1
Isfahan Great Industrial Town
Isfahan, Iran
Postal Code: 83311-34319

☎ +98 31 45647282-92
☎ +98 31 45647291
🌐 www.medivical.com
✉ info@medivical.com

Graphic Design **Rohamotamedi**
Photography **Makanshafiei**




Medivical



VIRA TREATA MODERN CO.

No. 18, Kar Afarinan St. 14/1
Isfahan Great Industrial Town
Isfahan, Iran
Postal Code: 83311-34319

☎ +98 31 45647282-92
☎ +98 31 45647291
🌐 www.medivical.com
✉ info@medivical.com

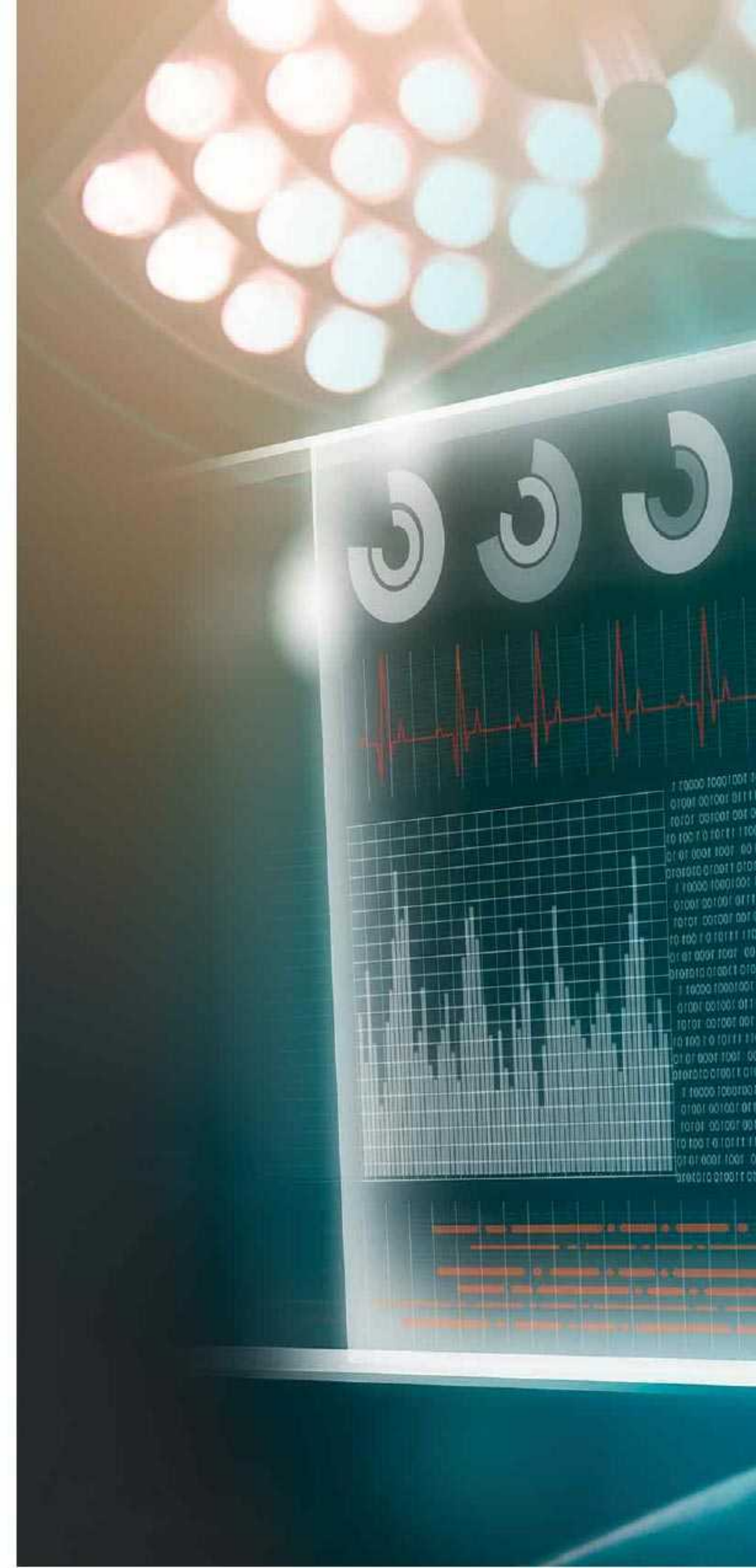

Surgical Suction Vira F60

ساکشن هوشمند جراحی

Application

- General Surgery
- Liposuction
- Endoscopy
- Emergency Unit
- Air Way Suction
- Neuro Surgery
- Wound Drainage
- Plastic Surgery

Fast Facts

- Reliability meets modern technology
- One-touch flow start
- Two years warranty
- ISO 13485
- High-quality, durable components
- Hygienic through intelligent construction
- In accordance with international standards

کاربرد

- کلیه بخش‌های جراحی
- لیپوساکشن
- CCU - ICU
- اورژانس و مطب

قابلیت‌های ویژه

- کاملاً بهداشتی با طراحی هوشمندانه
- قابلیت اطمینان بالا با فناوری مدرن
- اجزای با کیفیت بالا و با دوام
- مطابق با جدیدترین استانداردهای بین‌المللی
- دارای گواهی‌نامه ISO13485
- دو سال وارانتی
- طراحی مدرن و ارگونومی سازگار با کاربران





- 1 Vacuum Gauge in kPa and mmHg
- 2 Safety Set
- 3 Membrane Vacuum Regulator
- 4 On/Off Touch Button - Standby Indicator
- 5 Suction Tube Holder
- 6 Standard Rail
- 7 Change-Over Valve
- 8 5L or 3L Reusable Collection System
- 9 Four Castors with Brakes

Technical Highlights

- High Vacuum: Up to -90 kPa , -675 mmHg
- High Flow: Up to 60 L/min
- Dimension: 59 × 49 × 100 cm
- Weight: 18 Kg
- Protection Against Water: IP×1
- Fast Vacuum Build Up
- Very Quiet in Operation and Low-noise System
- Very Hygienic and Easy to use as well as versatile
- Membrane Vacuum regulator
- Vacuum gauge in kPa and mmHg
- Carrying handle
- Four Castors with brakes
- Smart sensor for over fill protection of Canister
- Mechanical over fill protection
- Touch ON/OFF button
- Standby indicator
- 5L and 3L reusable collection system
- 5.5L and 3.5 L disposable collection system
- Change-over valve
- Safety set

نکات برجسته فنی

- قدرت ایجاد و فشار منفی تا ۹۰- کیلو پاسکال
- قدرت ایجاد جریان تا ۶۰ لیتر بر دقیقه
- سرعت بالای ایجاد مکش
- کارکرد بی صدا با کمترین نویز صوتی
- کاملاً بهداشتی و آسان برای استفاده کاربران
- مجهز به سنسور هوشمند محافظت در مقابل پر شدن مخزن ها
- دارای کلید ON/OFF به صورت لمسی و کاملاً بهداشتی
- دارای مخزن جمع آوری در سایزهای ۵ لیتری و ۳ لیتری
- دارای کیسه یکبار مصرف در حجم های ۵/۵ لیتری و ۳/۵ لیتری
- مجهز به شیر انتخاب مخزن
- دارای ترالی با چهار چرخ جهت حمل آسان
- دارای رگولاتور تنظیم فشار و کیوم از صفر تا ماکزیمم
- مجهز به گیج فشار عقربه ای با دو واحد kPa و mmHg

مزایا

- دارای پورت وکیوم و پورت بیمار
- قابلیت اتصال شیلنگ یکبار مصرف ساکشن برای هر بیمار
- قابلیت اتصال سریع آداپتور به پورت وکیوم
- کاملا بهداشتی و مجهز به درب با قابلیت نصب سریع
- در دو حجم ۵ لیتری و ۳ لیتری برای کاربردهای مختلف
- مجهز به شناور مکانیکی جهت ممانعت از سرریز
- قابلیت شستشو با ضد عفونی کننده های بیمارستانی و اتوکلاو
- در دو قسمت محافظه و درب

Easy to Use and Virtually Indestructable

The Medivical Reusable Collection System consists of autoclavable suction canisters and lids with built-in overflow protection.

All two jar sizes [3L and 5L] have the same lid size to make handling easy and reduce logistical considerations.

The system is meant for flexible use: choose between the complete system or specific components and accessories; Medivical can help you select the products that are right for you.





Medivical Reusable Collection System

سیستم جمع آوری مایعات

Benefits of Reusable Collection System

Medivicals Reusable Collection System consists of multiple components and accessories. It is easy to use, easy to set up and hygienic. It provides simple, fast operation, is long-lasting and safe by design.

- Tubing can be quickly connected canisters to the system distinct vacuum and patient ports.
- The system comes with built-in mechanical overflow protection and easy-to-read graduated markings to indicate fluid volumes.
- The quick-to-connect components make the system ready to use in just seconds.



Disposable Collection System

Vira C5 . Vira C3


سیستم جمع آوری یکبار مصرف

Easy to Use

The Vira Treata Modern Disposable Collection System offers a whole range of advantages that makes it easy to implement in the hospital and clinic. Simply place the one-piece liner into the jar and it is ready to use in seconds. As the vacuum is located direct to the jar the liner can be conveniently removed and replaced without removing the vacuum tube. A one handed liner removal easy. If large amounts of fluid need to be suctioned, the system can be used in serial or with the change-over valve.

استفاده آسان

کیسه‌های یکبار مصرف تولیدی شرکت ویرا تریتا مدرن قابلیت استفاده در محفظه‌های مربوط به ساکشن را داشته و در مدت چند ثانیه با قرار دادن کیسه در جارهای دستگاه و اتصال تیوب‌های خروجی از دستگاه ساکشن Vira F60 برای مکش به این کیسه‌ها، بلافاصله قابلیت استفاده دارند. با استفاده از سیستم سری و شیر انتخاب کیسه، ظرفیت حجمی قابل استفاده از این حالت دو یا چند برابر می‌گردد.

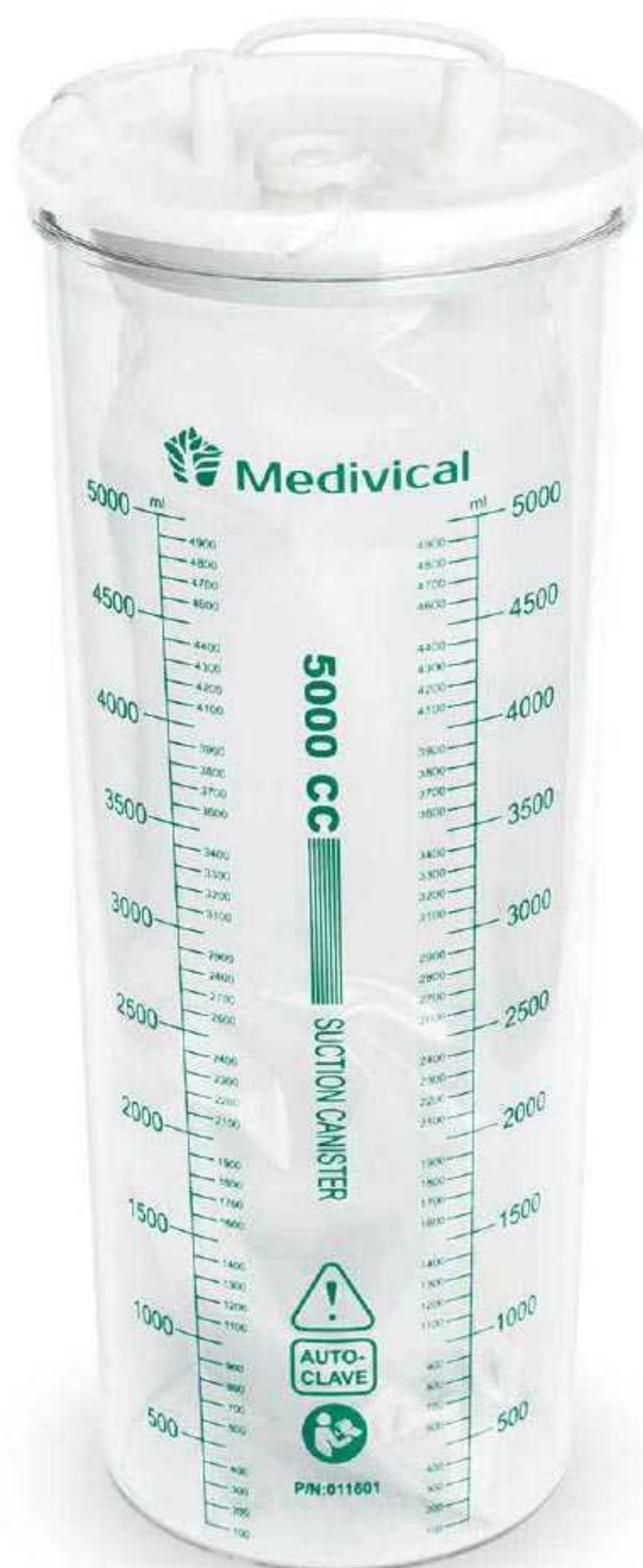

سیستم کاملا بهداشتی

کیسه‌های یکبار مصرف تولیدی شرکت ویرا تریتا مدرن مجهز به فیلتر مانع سرریز بوده که در صورت پر شدن کیسه بصورت اتوماتیک دریچه‌ی مکش را بسته و از ورود مایع به پمپ ساکشن جلوگیری می‌کند. همچنین جهت افزایش ضریب اطمینان در حین حمل و جابجای کیسه‌های پر شده، این کیسه‌ها مجهز به پودر ژل کننده بوده که تا زمان پایان ورود مایع به کیسه، این مایع را بصورت نیمه جامد ژله‌ای تبدیل می‌کند، و همچنین با استفاده از فیلتر ضد باکتری شرکت ویرا تریتا مدرن در ورودی پمپ، مانع انتشار باکتری‌ها و میکروب‌ها به محیط می‌گردد.

Hygienic

The system offers an overflow filter, integrated in each liner with fluid navigation to prevent back-flow and reduce foaming/back splashing. The material of the liner consists of layer for durability and odour control. A special feature is the pouch that keeps the solidifier contained until the liner is in use. This means no spillage or inconvenience for the staff.

Fast Facts

- Easy to set up and ready to use in seconds.
- Liner can be removed from jar independently from vacuum tubing.
- Overflow protection filter in each liner.
- The fluid navigation reduces foaming.
- Serial connection to allow suctioning of large volumes of fluid.
- Solidifier in pouch keeps solidifier contained until liner is in use.
- 3500cc and 5500cc for easy storage and logistics.

قابلیت‌های ویژه

- تنظیم آسان و سریع برای استفاده در چند ثانیه
- قابلیت جداسازی کیسه‌ها از جارها پس از پر شدن
- مجهز بودن هر کیسه به مانع سر ریز اتوماتیک
- قابلیت استفاده بصورت سری و شیر انتخاب
- مجهز به پودر ژل کننده
- دارای ظرفیت ۵/۵ لیتری و ۳/۵ لیتری

Bacterial Filter
فیلتر باکتری



Canister Holder
نگهدارنده محفظه جمع‌آوری



Canister Selection Valve
شیر انتخاب محفظه جمع‌آوری