




مخازن طبی آبادیس



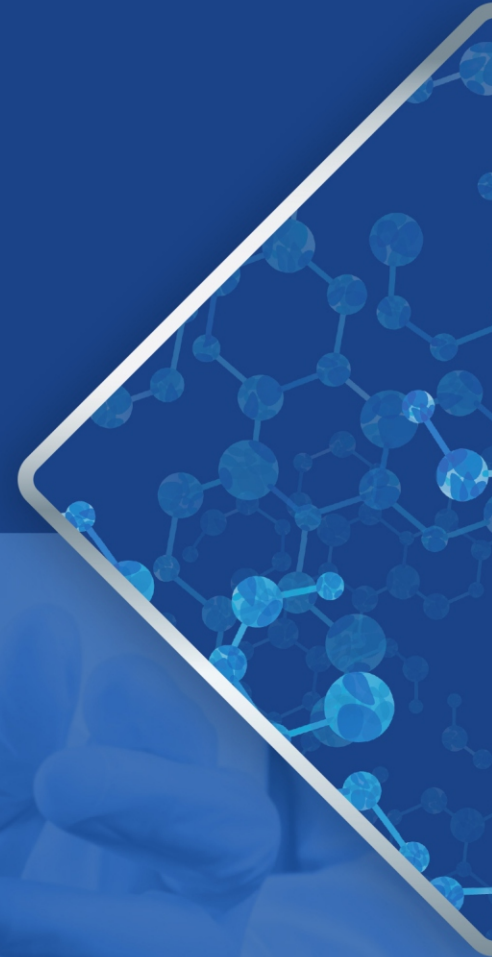

مخازن طبی **آبادیس** نامی جدید در صنعت تجهیزات مصرفی پزشکی در ایران می‌باشد. این شرکت در سال ۱۳۹۶ با نیروهای کارآمد و نخبه در این صنعت در شهرک صنعتی شمس‌آباد شروع به فعالیت کرده است. آبادیس تاکنون توانسته است با ثبت اختراع و طرح صنعتی پیشگام در تولید کیسه‌های ساکشن یکبار مصرف باشد. آبادیس محصولات خود را با کیسه‌های ساکشن یک بار مصرف در سایزهای مختلف با تمامی متعلقات خود، آغاز کرد و به زودی اخباری را در مورد محصولات دیگرش در حوزه کنترل عفونت بیمارستانی ارائه می‌دهد.

تمامی تجهیزات این کارخانه از کشورهای اروپایی و آسیایی معتبر با دانش فنی تمام ایرانی خریداری شده است. کیفیت محصولات تولیدی مخازن طبی آبادیس نسبت به سایر رقبای منطقه با اختلاف چشمگیری بالاتر می‌باشد .

آبادیس با توان بالای تولید دو و نیم میلیون کیسه در سال اول، نه تنها تمام کشور را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه آماده صادرات به کشورهای هم جوار خود می‌باشد. آبادیس با نگاه پیشرفت در زمینه کنترل عفونت در ایران، جلوگیری از خروج ارز، اشتغال‌زایی و اقتصاد مقاوتی کار خود را آغاز نموده است و در حال حاضر آماده همکاری با تمامی بیمارستان‌ها، پزشکان، نخبگان و همه افراد دخیل در حوزه کنترل عفونت می‌باشد.



کیسه های ساکشن یکبار مصرف چیست؟

کیسه‌های ساکشن یکبار مصرف آبادیس، نسل جدید مخازنی است که در قدیم به عنوان جمع آوری ضایعات در حین عمل از بدن بیماران ساکشن می‌شد. این روش ایمن‌ترین و پرکاربردترین سیستم ساکشن ضایعات عفونی در مراکز درمانی می‌باشد. این سیستم با حفظ عفونت در کیسه‌های خود از انتشار و پراکندگی ضایعات عفونی در بخش‌های مختلف از طریق بسته بودن و پودر جاذب موجود در کیسه‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد.

مخازن طبی آبادیس توانسته است با کیفیت بالا و قیمت مناسب از هزینه‌های اضافی و جلوگیری از مصرف آب و کنترل عفونت بیمارستانی گامی بزرگ در ارتقا نظام سلامت کشور بردارد.

مزایا:

- ◆ راهی موثر در کنترل عفونت‌های بیمارستانی
- ◆ حذف هزینه‌های مربوط به مواد ضدعفونی‌کننده و مصرف آب
- ◆ سهولت در استفاده
- ◆ حذف مصرف آب و مواد ضدعفونی‌کننده
- ◆ قابلیت امحا
- ◆ کاهش هزینه‌های مربوط به نیروهای بیمارستانی
- ◆ جلوگیری از انتقال بیماری‌ها
- ◆ حذف زمان شست و شوی مخازن
- ◆ احترام به کاربران و نیروهای بیمارستانی برای جلوگیری از شست و شوی ضایعات
- ◆ جلوگیری از اخلاف در دستگاه‌های ساکشن و پرتابل بیمارستان‌ها



کیسه ۱ لیتری



کیسه ۲ لیتری



کیسه ۳ لیتری



مخزن ۱ لیتری



مخزن ۲ لیتری



مخزن ۳ لیتری



پودر جاذب



گیره T شکل



لوله اتصال




رگلاتور



گیره دیواری



پایه نگهدارنده

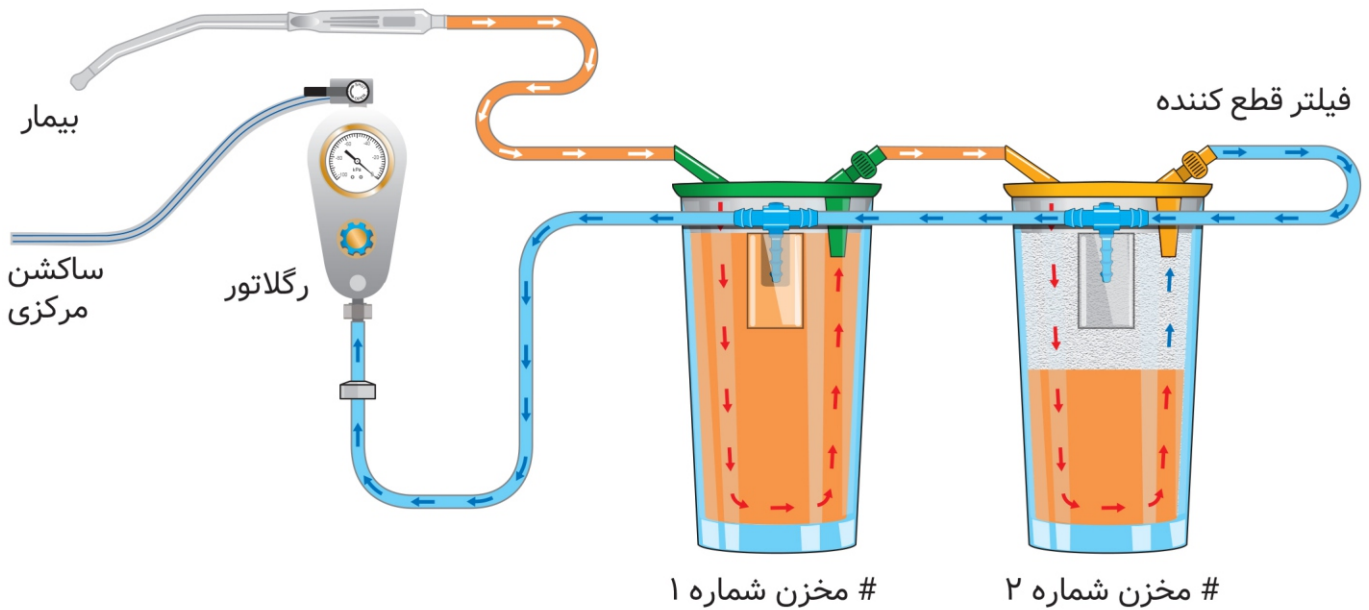

← ضایعات به کیسه اولیه وارد می شود و به محض پر شدن کیسه اول، از طریق اتصالات به کیسه های بعدی منتقل می شود و به دلیل داشتن فیلتر قطع کننده مانع از سرریز شدن کیسه ها می شود.

← سیستم ساکشن از طریق رگلاتور به بالای مخازن و یا پایه های نگهدارنده متصل شده است که فشار ساکشن به صورت U شکل از مخزن شماره یک به بالای مخزن شماره ۲ متصل می شود. فشار ساکشن از طریق سه راهی T شکل بین مخازن ۱ و ۲ در جریان می باشد که یکی از ویژگی های مخازن طبی آبادیس نسبت فشار مناسب ساکشن می باشد. فیلتر قطع کننده در کیسه مخزن شماره ۲ اطمینان بالایی جهت جلوگیری از سرریز شدن می دهد.



☎ ۰ ۲۱ _ ۲۲۶۷۱۸۴۵
📅 ۰ ۲۱ _ ۲۲۲۱۹۲۳۴
✉ ۱۹۳۵۸۳۹۶۸۳
🌐 www.abadis-med.com
📧 info@abadis-med.com
📍 تهران، قیطریه، بلوار اندرزگو، پلاک ۱۰۴