



شماره ثبت ۱۶۱۳۱۰

شرکت گازهای طبی ره پویان توسعه تهران

RAHPOOYAN MEDICAL GASES COMPANY

Preparation, implementation, installation and commissioning of medical gas systems

تهیه، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم
گازهای طبی بیمارستانی

PR

شرکت کارهای طبی ره یوان توسعه تهران





شرکت گازهای طبی ره پویان توسعه تهران
RAHPOOYAN MEDICAL GASES COMPANY



VACUUM

ABNORM

ALA
SILF



FITTED

NITROUS

92

RAHPOOYAN TOSEYE. Co



NITROUS

Deutsches Institut für Normung

Medical Gas

Outlets



R RAHPOOYAN MEDICAL
GASES COMPANY

Outlets



NITROUS

Deutsches institut für Normung

آتلت های ساخت شرکت گازهای طبی ره پویان توسعه تهران
در انواع تک گاز دو گاز، سه گاز، و چهار گاز طراحی شده است.

Outlets

Medical Gas



کنسول (برد) بالای تخت بیمار (بخش های ویژه)

Bed Head Console (Design for ICU & CCU)



CN-901


- 6- چراغهای روشنایی عمومی
- 7- نوع جنس پروفیل آلومینیوم آنادایز شده
- 8- پریز برق UPS
- 9- امکان نصب پایه مانیتورینگ

1- انواع آلت های گازهای طبی (Vac-Air-02)


- 2- پریز برق ارت دار
- 3- پریز تلفن
- 4- پریز شبکه کامپیوتر
- 5- چراغهای روشنایی مطالعه



Bed Head Console (Design for Inpatient Wards)

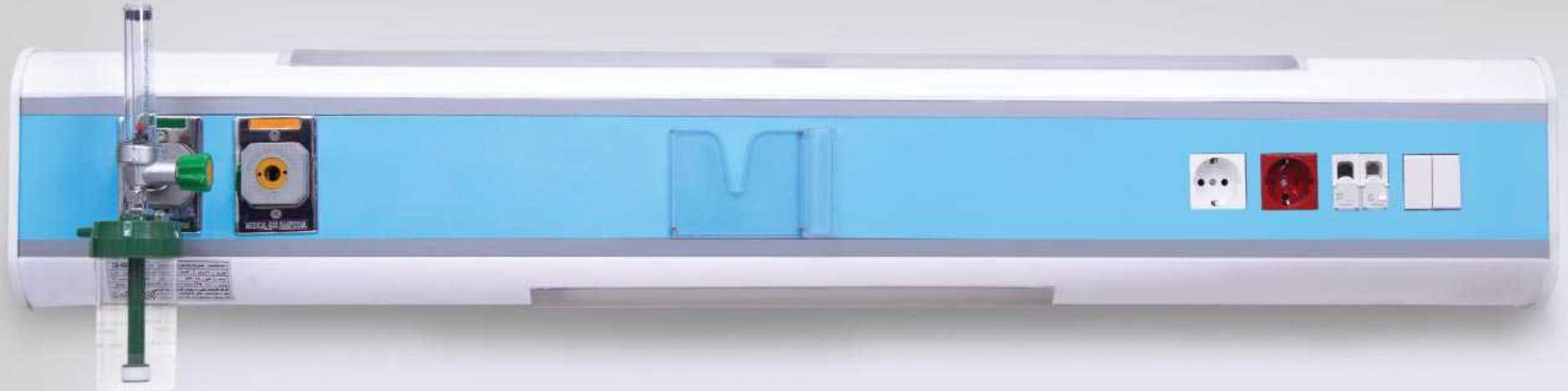

CN-602

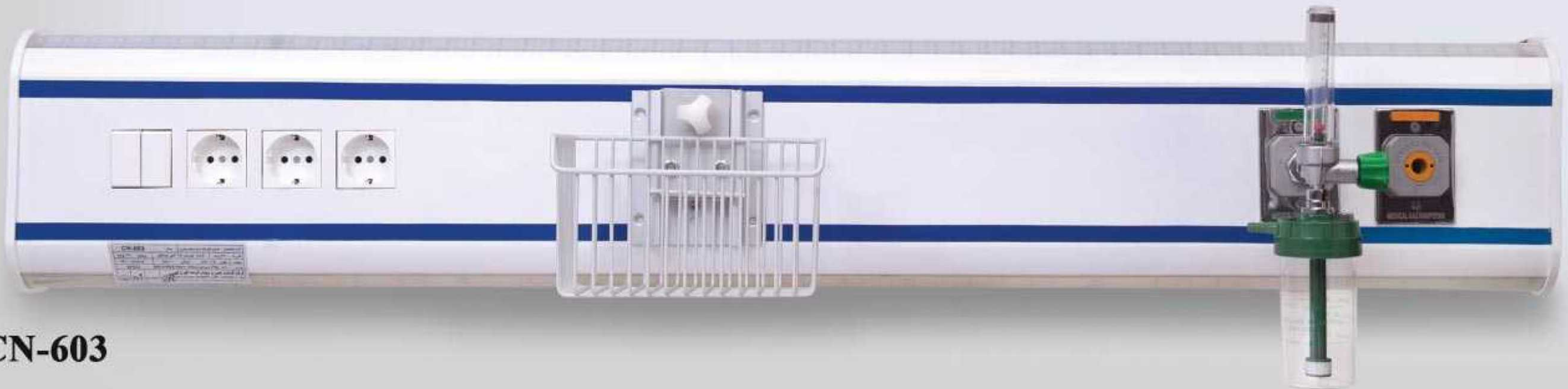

CN-603

کنسول (برد) بالای تخت بیمار (بخش بستری)



CN-601

کنسول بالای تخت بیمار ساخت شرکت گازهای طبی ره پویان توسعه تهران مجموعه ای کامل تولید شده از جنس پروفیل آلومینیوم با رنگ مخصوص الکترواستاتیک بسیار مقاوم در طرحها و رنگهای متفاوت برای بخشهای مختلف تولید می شود. کلیه تجهیزات اعم از انواع آلت، پریزهای برق و سوکت کامپیوتر و تلفن بر روی پروفیل زیرین قابل نصب می باشد. امکان داشتن پلاک مشخصات بیمار، انواع روشنایی های عمومی و مطالعه که با لامپ های 36wFPL با عمر طولانی و بالاست الکترونیکی می باشد. توسط جابجا محافظت شده است.

Bed Head Console (Design for Inpatient Wards)



CN-605



CN-606

کنسول (برد) بالای تخت بیمار (بخش بستری)



CN-604

- 1- طراحی زیبا
- 2- بسیار بادوام و سبک
- 3- تنوع پذیری در رنگ و اندازه
- 4- مناسب بخش های بستری و ویژه



Different kinds of connectors آداباتور آتلت

به وسیله کدهای خاص قابل تمیز دادن است و حتی در صورت تشخیص اشتباه بهره بردار در کدها اجازه ورود آداباتور غیر همنام را به آتلت نمیدهد.

سه راهی رابط آتلیت

جهت استفاده در بخش های ویژه و اتاق عمل





آتلت گازهای طبی (توکار) Wall out let push type

با طراحی دقیق و توجه کیفیت بالای قطعات داخلی از جمله اورینگ های بکار رفته از جنس سیلیکون، دارای دوام طولانی .
آتلت ها به گونه ای طراحی شده که فقط با آداباتور مخصوص به خود می توان از گازهر آتلت استفاده کرد و مانع هر گونه اشتباه احتمالی پرستار استفاده کننده می شود.





Different kinds of connectors آداپتور آتلت

به وسیله کدهای خاص قابل تمیز دادن است و حتی در صورت تشخیص اشتباه بهره بردار در کدها اجازه ورود آداپتور غیر همنام را به آتلت نمیدهد.

سه راهی رابط آتلیت

جهت استفاده در بخش های ویژه و اتاق عمل





آتلت گازهای طبی (توکار) Wall out let push type

با طراحی دقیق و توجه کیفیت بالای قطعات داخلی از جمله اورینگ های بکار رفته از جنس سیلیکون، دارای دوام طولانی .
آتلت ها به گونه ای طراحی شده که فقط با آداباتور مخصوص به خود می توان از گازهر آتلت استفاده کرد و مانع هر گونه اشتباه احتمالی پرستار استفاده کننده می شود.



بوش مسی



تبدیل مسی



کوئل مسی



زانویی مسی



سه راه مسی



PR

شرکت کارهای طبی ره پویان توسعه تهران

لوله مسی



والو باکس روکار

(در مدل‌های دو گاز - سه گاز و چهار گاز)




والو باکس توکار

(در مدل‌های دو گاز - سه گاز و چهار گاز)



آلارم باکس طرح جدید

والو باکس طرح جدید

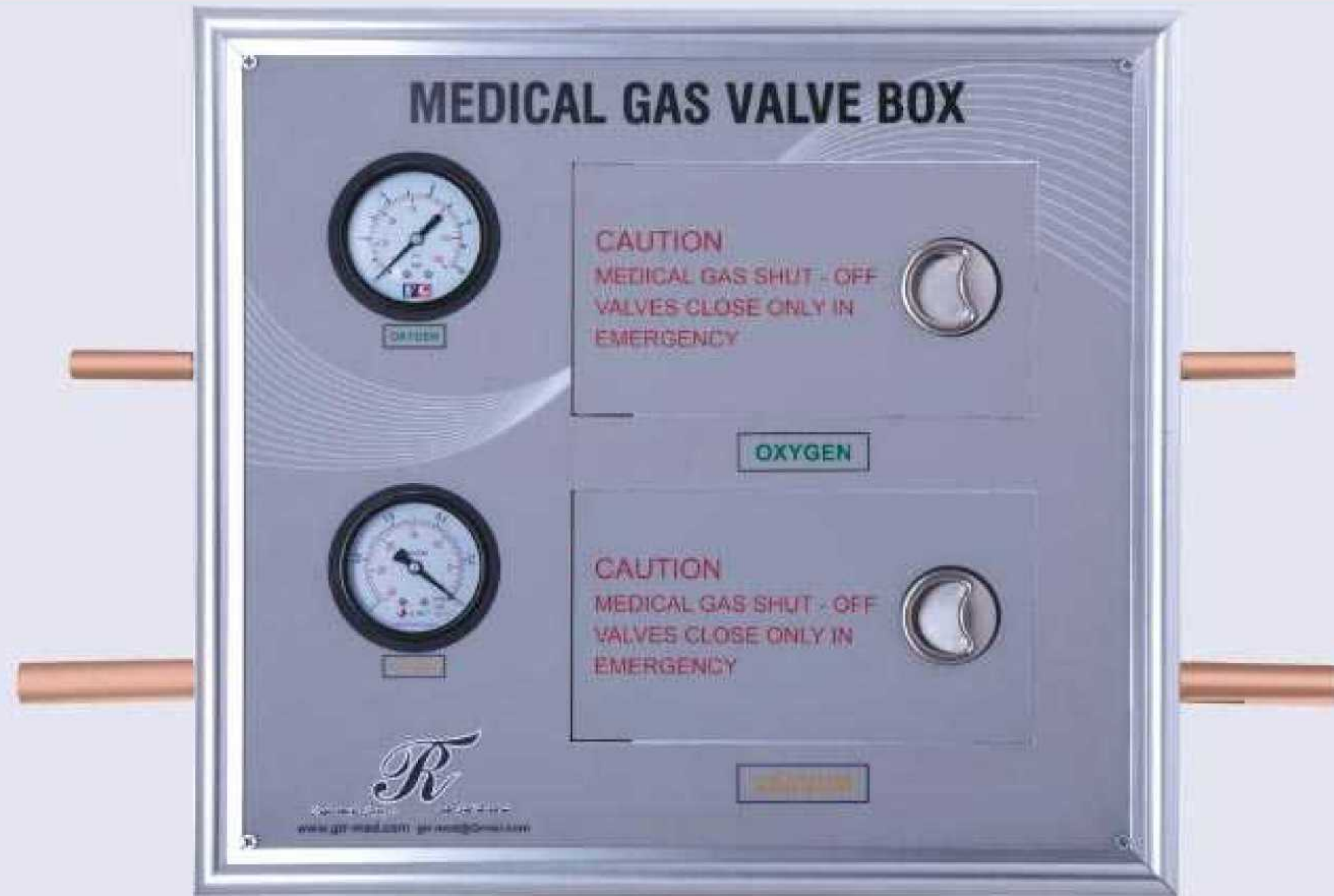

آلارم گازهای طبی

Medical Gas Alarm

آلارم گازهای طبی دستگاهی است جهت کنترل فشار خطوط گازهای طبی بیمارستان که بصورت سمعی و بصری اعلام خطر می نماید. در طراحی جدید این سیستم با استفاده از صفحه کی پد و به کار گرفتن شستی Alarm Silence به صورت عملکرد سیستم بهینه Finger Touch گردیده است. در هنگام بروز افت فشار گاز، با روشن شدن چشمک زن قرمز همراه با صدای آلارم وضعیت غیر عادی را جهت LED فراخوان پرسنل نگهداری سیستم اعلام می نماید.





دستگاه ستون سقفی Ceiling Pendant

- 1- طراحی زیبا و دقیق جهت تامین نیازهای اتاق عمل و بخش های ویژه، مجهز به بازوی متحرک و قابلیت اتصال به بازوی دوم افقی جهت افزایش قدرت مانور
- 2- چرخش 330 درجه
- 3- مجهز به ترمز پنوماتیک
- 4- طبقات متعدد با قابلیت تنظیم ارتفاع

RP-100



Medical air compressor system **FINI** ایتالیا

با ظرفیت های مختلف (به صورت دوپلکس)
دارای درایر، فیلتر چهار گانه آنتی باکتریال و مداربای پاس



دستگاه ساکشن مرکزی

Central Medical Vacuum System

با ظرفیت های مختلف (به صورت دوپلکس)



منیفلد گازهای اکسیژن و بیهوشی با هدر مربوطه Medical Gas Manifold




هدرهای ساخته شده از شیرهای فشار قوی خارجی
کوئل های مسی فشار قوی
بهترین رگلاتورهای تقلیل فشار (گلو رسونیس)
فلنج های برنجی

کنسول (برد) ایستاده، بخشهای ویژه

Bed Head Console

(Design for ICU & CCU)

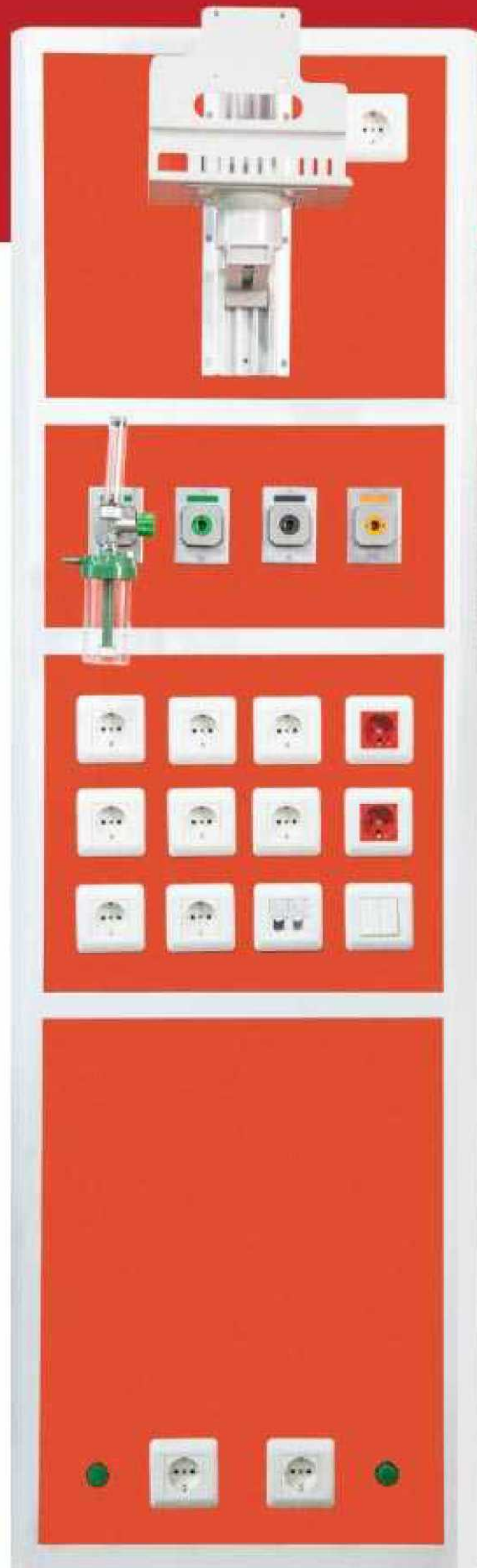

CN-903



CN-902

1- طراحی زیبا

2- بسیار بادوام و مقاوم

3- تنوع پذیری در رنگ و اندازه

4- نوع جنس از و پروفیل آلومینیوم

PR

شرکت کارهای طبی ره یویان توسعه تهران





شرکت گازهای طبی ره پویان توسعه تهران

دارنده گواهینامه

ISO 13485- ISO 9001

نشانی: تهران، بلوار کشاورز، ما بین خیابان فلسطین و نادری، جنب
هتل اسپیناس، پلاک ۱۳۲ (ساختمان صدف) طبقه دوم، واحد ۳۰۳
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۷۹۷۳۴-۶ تلفکس: ۰۲۱-۸۸۹۷۵۲۳۲

محمد علی حییبی ۰۹۱۲ ۱۷۸۹۹۰۶

Website: www.gtr-med.com

Email: info@gtr-med.com