



# کاتالوگ محصولات جامع

نسخه 202001



هولدینگ پورسینای حکیم در سال ۱۳۸۰ با هدف ایجاد مدلی عملی و تکرارپذیر برای توسعه‌ی پایدار از طریق ایجاد ثروت از علم و همچنین علم از ثروت تاسیس گردید.

شرکت مسیح (مهندسی سلامت یار حکیم)، تولیدکننده‌ی تجهیزات تخصصی پزشکی به عنوان زیرمجموعه هولدینگ پورسینای حکیم در سال ۱۳۹۲ تاسیس گردید. بهره‌گیری از راهنمایی‌های پزشکان مطرح و به کارگیری مهندسين خبره سبب شد، تا این شرکت درک عمیقی از چالش‌های پزشکان و رنج بیماران داشته باشد.

با توجه به موقعیت جغرافیایی شرکت مسیح در قلب خاورمیانه، چشم‌انداز ما حضور masstecmedical در بین ۱۰ نشان برتر تجهیزات پزشکی در حوزه‌های تخصصی گوارش، زنان و زایمان، آنکولوژی، جراحی و بازتوانی در منطقه است.

نشان تجاری این شرکت پرنده سفید و نام تجاری مستک برگرفته از ابتدای کلمات مسیح و تکنولوژی است که یادآور نفس جان‌بخش حضرت مسیح و تبدیل گل به پرنده و الهام‌بخش سلامتی و زندگی است. «شوق شفا»، شعار مسیح و بیانگر چکیده ماموریت سازمان ماست.



## گواهینامه ها و تاییدیه ها



# FSC

Free Sales Certificate

# IMED

National Medical  
Device Directorate IR.IRAN



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت صنعت، معدن و تجارت



ISO 9001



ISO 13485




## محصولات زنان و زایمان | Gynecology

با توجه به شیوع گسترده ناباروری به دلیل تغییرات سبک زندگی و همچنین انواع سرطان از جمله سرطان‌های زنان، لزوم تولید تجهیزات مرتبط با این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. به همین جهت مسیح در اولین گام خود در سال ۹۲ اقدام به ساخت کاتتر IUI با طراحی اصلاح شده جهت درمان ناباروری نمود، که منجر به مزین شدن این شرکت به نشان دانش‌بنیان گردید. از آن سال تا کنون محصولات متعدد دیگری در حوزه زنان و زایمان به سبد محصولات مسیح اضافه شده است که در این فصل معرفی خواهند شد.

## کاتتر IUI (Intrauterine insemination Catheter)

IUI به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های درمان ناباروری شناخته می‌شود. در این روش اسپرم تقویت شده به داخل رحم تزریق می‌شود. بدین منظور از لوله‌ای ویژه و بهداشتی با عنوان کاتتر IUI استفاده می‌شود. به علاوه این کاتتر در تزریق PRP و G-CSF به داخل رحم نیز کاربرد دارد.

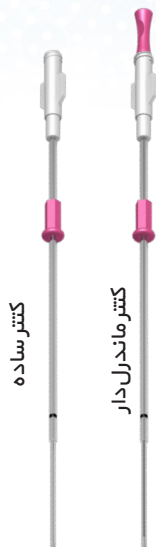

### ■ مدل‌ها

- کاتتر IUI ساده: برای سرویکس‌های ساده (Soft)
- کاتتر IUI ماندرل دار: برای سرویکس‌های سخت و پیچیده

### ■ مشخصات

- طول کاتتر ۱۷ سانتی‌متر
- استریل شده با EO
- بسته‌بندی مدیکال تکی، جعبه‌های ۲۵ تایی، کارتن‌های ۷۰۰ تایی

### ■ ویژگی‌های اختصاصی

- هاب لوئرلاک
- مدرج و دارای استوپر
- سوراخ‌های انتهایی کناری برای جلوگیری از ورود آلودگی
- سر دیستال کروی برای ورود راحت و بدون تروما

## کاتتر پایپل (Endometrial Suction Curette Catheter)

بیوپسی از اندومتر و رحم عموماً در افراد مشکوک، برای تشخیص دقیق احتمال وجود سرطان صورت می‌پذیرد. کاتتر پایپل به پزشک اجازه می‌دهد تا با استفاده از نیروی ساکشن و خراش سطحی، نمونه لازم جهت آزمون پاتولوژی را با کمترین آسیب بدست آورد. این روش در سال‌های اخیر به دلیل هزینه کمتر، سرپایی بودن و عدم نیاز به بیهوشی تا حد زیادی جایگزین کورتاژ سنتی در اتاق عمل شده است.

### ■ مدل‌ها

- کاتتر پایپل ساده: نوع معمول و راحت‌تر در استفاده
- کاتتر پایپل سرنگدار: بالاترین درجه نمونه‌برداری با کمک ساکشن سرنگ

### ■ مشخصات

- طول کاتتر ۲۳ سانتی‌متر
- استریل شده با EO
- بسته‌بندی مدیکال تکی، جعبه‌های ۲۵ تایی، کارتن‌های ۲۰۰ تایی

### ■ ویژگی‌های اختصاصی

- راحتی استفاده (مدل ساده)
- مقرون به صرفه بودن (مدل ساده)
- نمونه‌برداری با حجم دلخواه با استفاده از سرنگ مدرج (مدل سرنگدار)
- برداشت بافت کافی با ساکشن قوی سرنگ و عدم نیاز به نمونه‌برداری مجدد (مدل سرنگدار)



## کاتر هیسترومتر (Hysterometer)

با توجه به تفاوت‌های آناتومیکال در افراد مختلف، در بسیاری از موارد پزشکان زنان نیاز به اندازه‌گیری عمق رحم دارند. کاتر هیسترومتر ابزاری برای اندازه‌گیری عمق رحم است. گرچه در سال‌های قبل نمونه‌های دائم مصرف رایج بودند، اما با ارتقای سطح بهداشت و جهت جلوگیری از انتقال بیماری‌های واگیردار، هم اکنون گونه‌های یکبار مصرف بیشترین تقاضا را به خود اختصاص داده‌اند.

### ■ مشخصات

- طول کاتر ۱۷ سانتی‌متر
- استریل شده با EO
- بسته‌بندی مدیکال تکی، جعبه‌های ۲۵ تایی، کارتن‌های ۵۰۰ تایی

### ■ ویژگی‌های اختصاصی

- جلوگیری از انتقال بیماری‌ها و عفونت
- مدرج بودن و وجود استوپر جهت اندازه‌گیری دقیق عمق رحم
- استفاده از مواد پلیمری گرید بهداشتی و در نتیجه کاهش احتمال پارگی رحم و ایجاد تروما حین اندازه‌گیری توسط افراد آماتور



## محصولات گوارشی | Gastroenterology

با توجه به حضور متبحرترین پزشکان فوق تخصص گوارش ایران در تیم تحقیقاتی مسیح، تجهیزات گوارشی یکی از اصلی‌ترین محورها در توسعه محصولات مسیح است. درک دقیق نیازمندی‌های پزشکان این حوزه و ترکیب آن با خلاقیت‌های مهندسی مزیتی است که مسیح قصد دارد با تکیه بر آن محصولاتی منحصر به فرد ارائه دهد. اولین محصول این حوزه دهانی آندوسکوپی، در سال ۹۴ به بازار عرضه گردید. با تلاش تیم تحقیقاتی مسیح، در سال ۹۹ دو محصول دیگر در این حوزه رونمایی خواهد شد.




## دهانی آندوسکوپی (Endoscopic Bite Block)

در بسیاری از عمل‌های آندوسکوپی دستگاه گوارش باید لوله آندوسکوپ از دهان بیمار عبور کند. دهانی آندوسکوپی سبب جلوگیری از آسیب دیدن آندوسکوپ و دهان بیمار می‌شود. لبه‌های دهانی از مواد با سختی بهینه ساخته می‌شوند تا ضمن خنثی نمودن فشار دندان‌ها، از آسیب دیدگی دهان بیمار جلوگیری شود.

### ■ مشخصات

- پلیمر بهداشتی مرغوب
- تولید شده در محیط GMP
- بسته‌بندی مدیکال تکی، بسته‌های ۵۰ تایی، کارتن‌های ۵۰۰ تایی

به زودی از محصولات پیشرفته گوارشی  
مسیح رونمایی خواهد شد.

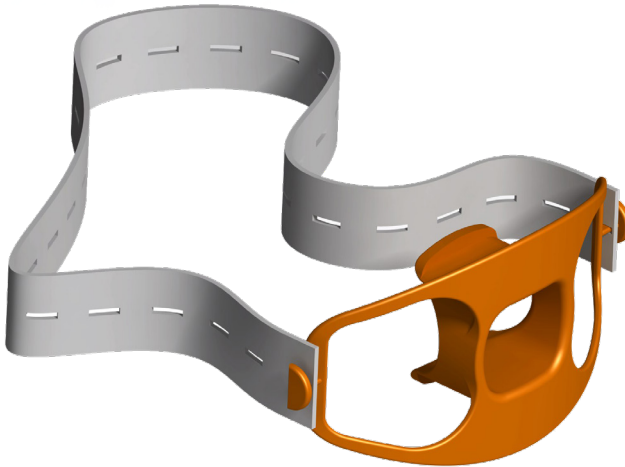

## محصولات پیش‌گیری از ویروس کرونا | Corona Prevention

اگرچه مسیح مأموریت اصلی خود را بر رفع نیاز حوزه‌های فناورانه و تخصصی پزشکی معطوف نموده است؛ اما حوادث ناگواری مانند رخداد پاندمی کرونا در جهان باعث شد که مسیح بر اساس حس وظیفه‌شناسی و مسئولیت اجتماعی وارد میدان شود و برخی محصولات مرتبط با کرونا را برای کمک به رفع نیاز کادر درمانی تولید نماید. سبد محصولات پیشگیری از کرونا با شیلد محافظ صورت از اسفندماه ۹۸ شروع شد. امیدواریم هر چه زودتر این همه‌گیری به پایان رسیده و بیماران مبتلا بهبود یابند.

EMERGENCY SHIELD

masstec<sup>®</sup>  
MEDICAL



## شیلد محافظ صورت (Emergency Face Protection Shield)

این محصول یک محافظ کامل در مقابل آلودگی‌های پرتابه‌ای دهان بیماران واگیردار (از جمله COVID-19) است. ابعاد بهینه این محصول باعث می‌شود که چشم، دهان و صورت را از کلیه پرتابه‌های میکروبی به خوبی حفاظت کند.

### ■ مدل‌ها

- شیلد کشدار: ابعاد بزرگتر و دارای هدبند کشی
- شیلد فریم‌دار: ابعاد بهینه‌تر و دارای یک فریم فنی

### ■ مشخصات

- تولید شده در محیط GMP
- بسته‌بندی بهداشتی تکی (فریم‌دار) و ۲۰ تایی (کشدار)، کارتن‌های ۵۰۰ تایی

### ■ ویژگی‌های اختصاصی

- حفظ میدان دید طبیعی
- قابل استفاده بر روی عینک طبی
- سبک و راحت برای استفاده طولانی
- بدون سایز و قابل استفاده برای تمام صورت‌ها
- عدم رشد باکتری و ایجاد بوی بد حتی در استفاده‌های طولانی مدت
- پوشش کامل صورت و حفاظت از ترشحات و بوی بد دهان بیمار
- قابلیت چرخش و قرارگیری روی سر برای مواقع استراحت کوتاه مدت بدون نیاز به برداشتن (فریم‌دار)





شوق شفا



[www.masstecmedical.com](http://www.masstecmedical.com)