



NOORSA
DAYAN
DARMAN

نورسا دایان درمان



NOORSA
DAYAN
DARMAN

درباره ما

شرکت نورسا دایان درمان یک شرکت تولیدی ثبت شده و دارای تکنولوژی داخلی کامل در حوزه ی تولیدات خود می باشد.

این شرکت دانش بنیان با اخذ پروانه ی ساخت دستگاه ویدئو لارنگوسکوپ اولین تولید کننده ی این محصول در ایران می باشد و در راستای افزایش سلامت عمومی در ایران و جهان گام بر می دارد .

این شرکت مفتخر است اولین دستگاه ویدئو لارنگوسکوپ را با تکنولوژی و دانش فنی داخلی تولید به جامعه ی پزشکی کشور ارائه نماید.

در این راستا پس از انجام تحقیقات علمی و طراحی های فنی مناسب و آزمون های مختلف پس از اخذ گواهی اختراع از مراجع ذیصلاح اقدام به تولید دستگاه نموده است.

کرمانشاه، میدان کاشانی، خیابان فردوسی ۰۸۱۸۹۹۱۸۲۷۶

نیش خیابان شورا طبقه فوقانی، خانه کتاب ۰۹۱۸۹۹۱۸۲۷۳

واحد ۸ شرکت نورسا دایان درمان ۰۹۱۹۷۱۴۷۵۸۱



این دستگاه دارای تیغه ویدیویی حنجره بینی و صفحه نمایش است که با قرار گرفتن تیغه آن در انتهای زبان دید غیر مستقیم از ناحیه حنجره را فراهم می آورد و با نمایش تصویر تارهای صوتی و مسیر تنفسی امنیت و دقت عمل لارنگوسکوپی یا انتیوباسیون را افزایش می دهد

طراحی ها در راستای الزامات اروپایی است که به صورت ایده آل سختگیرانه ترین انتظارات مبنی بر ضوابط بهداشتی و ارگونومیکی را محقق می سازد.




مشخصات فنی محصول:

- لنز دوربین دارای سیستم ضد بخار
- طراحی ویدئو تیغه و هندل بصورت یکپارچه
- ریز دوربین ۲ مگاپیکسل
- سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه و محدوده و زاویه دید ۵۴ درجه
- پشتیبانی از قابلیت های ویدئویی مختلف
- ذخیره و آرشیو داده ها بصورت دائم
- قابلیت برخورداری از حافظه تا ۲۵۶ گیگابایت
- حداکثر سطح مقطع تیغه ۱۴ میلی متر
- مجهز به صفحه نمایش (High Resolution) ۱۰ اینچی
- دارای فناوری تاچ اسکرین


کاربردهای کلینیک:

- آموزش آناتومی مسیرهای هوایی
- آمبولیزاسیون ستون فقرات
- لوله گذاری مجدد در ICU
- لوله گذاری مسیر های هوایی متورم یا سخت
- مانتورینگ مسیر هوایی در ICU

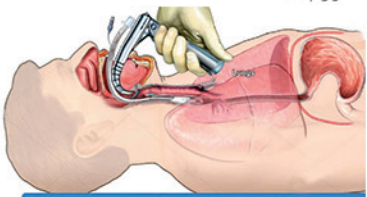

در گذشته لارنگوسکوپها برای تسهیل در استریلیزاسیون بصورت چند تکه ساخته میشدند که باعث بروز خطا در استفاده مجدد میشد ولی در طراحی ما وسیله کاملا یک تکه، نفوذناپذیر و قابل استریل شده است.

قطر تیغه لارنگوسکوپ و تیغه ویدیویی بسیار کم بوده و برای ساخت تیغه از استیل نگیر استفاده شده که برای استریلیزاسیون در محیط بیمارستانی کاملا ایده آل است و در مقایسه با سایر محصولات بسیار شاخص می باشد. با ویژگی های متمایز توسط متخصصین سرآمد واحد تحقیق و N-VIS نسل به روز شده ویدئو لارنگوسکوپ توسعه شرکت از حوزه های مختلف فناوری توسعه یافته است.

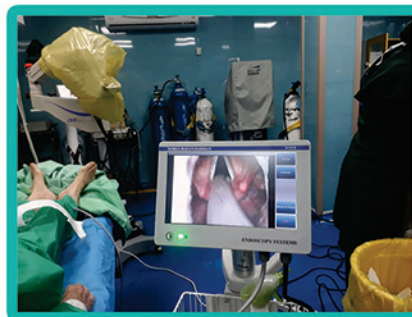

شاخص هایی که اجرا و پیاده سازی طیف مختلفی از فاکتورها می باشد و بعنوان نیازهای کلیدی مشتری ظاهر میگردد و از بین آنها موارد زیر را میتوان اشاره کرد

- ✓ تصویر ویدیویی با کیفیت عالی در نوردهی یکنواخت
- ✓ حذف مات شدگی ناشی از بخار
- ✓ ثبت توالی تصاویر در زمان واقعی و حفظ کیفیت نمایش واضح و روان
- ✓ استفاده مجدد سریع و بسیار ساده منطبق با آخرین استانداردها
- ✓ یکپارچگی حداکثری قطعات و سهولت کاربری
- ✓ پشتیبانی از لوله گذاری مستقیم و غیر مستقیم
- ✓ دستگاه دارای ۲ سال گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش

